# *3-Point Products,® Inc.*

**Oval-8®**

CE

**Kasutusjuhend – Eesti (ET)**

www.3pp-eifu.com


**Kirjeldus**: Oval 8 sõrmeortoosid on vormitud plastist valmistatud seadmed, mis on mõeldud kandmiseks sõrmel selle toetamiseks, kaitsmiseks ja asendi korrigeerimiseks. Neid toodetakse 14 erinevas suuruses, et need sobituksid erinevate suurustega sõrmedele. Oval 8 sõrmeortoosid on veekindlad ja neid võib kanda ka märgades tingimustes.

**Eesmärk / otstarve**: Oval 8 sõrmeortoosid on mõeldud tekitama sõrme ümber kolme punktiga toestust, et hoida liigest sirgena, vältida või piirata liikumist kaitse eesmärgil ning võimaldada paranemist. Seadet saab kasutada mitmesuguste sõrmeprobleemide korral, sõltuvalt sellest, kuhu ja kuidas ortoos sõrmele paigaldatakse.


**Ettevaatusabinõud**: Ei tohi kasutada lahtistel haavadel. Ei tohi kasutada turse korral. Ei tohi kasutada varvastel. Seade võib põhjustada sõrmel ärritust või survepunkte. Kui tekib ärritus või surve, lõpetage ortoosi kandmine. Kui ärritus ei möödu, pöörduge tervishoiutöötaja poole. Järgige puhastamise juhiseid kindla regulaarsusega. Hoiatus: alla 5 aastased lapsed ei tohi ortoosi kanda. Allaneelamisel võib põhjustada lämbumist.

**Juhised:** kuidas kanda Oval 8 sõrmeortoose erinevate sõrmeprobleemide korral


1. Boutonnière'i deformatsioon

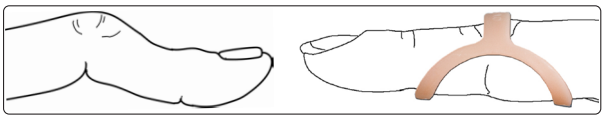


2. Kõver sõrm

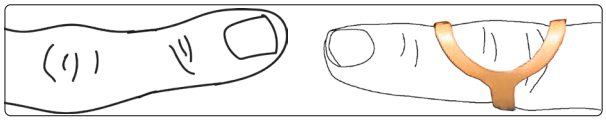


3. Päästiksõrm

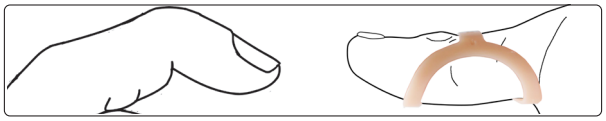


4. Mallet sõrm

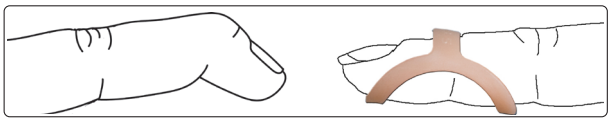

5. Luigekaela deformatsioon

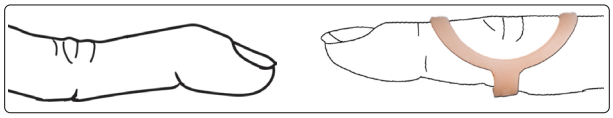



6. Päästiksõrm

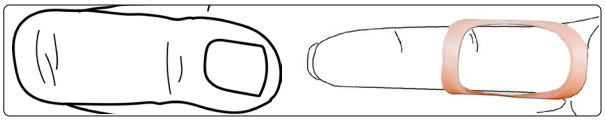

©3-Point Products, Inc. 2026

**Märkus:** Oval 8 ortoosid on veidi erineva istuvusega sõltuvalt sellest, kumma otsa panete esmalt sõrme peale. Plussmärgiga (+) tähistatud ots on lõdvem.

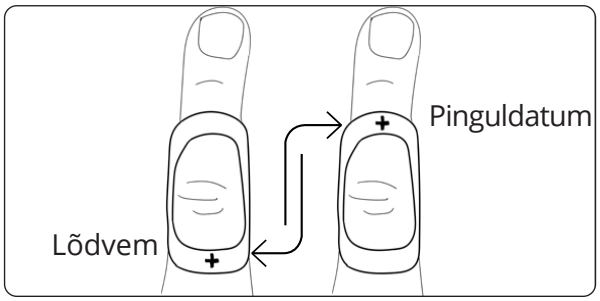

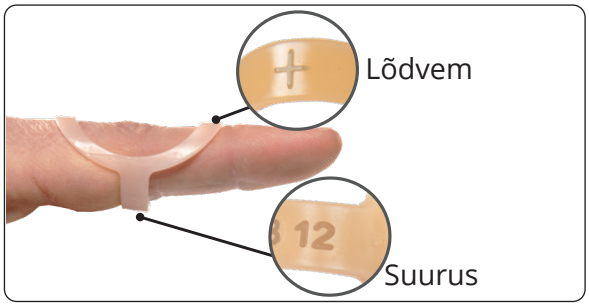
Oval-8 beež ja läbipaistev detailid on olemas mõlemas värvitoonis

**Oval 8 sõrmeortoosi suuruse määramine:** Juhised sõrmede mõõtmiseks õige suuruse leidmiseks on toodud lehekülgedel 3 ja 4.

**Tarne / koostis**: Oval 8 Beige (beež) on valmistatud puhtast polüpropüleenist. Oval 8 Clear (läbipaistev) on valmistatud kopolüestrist. Toode ei sisalda lateksit. Ärge kasutage, kui seade on kahjustatud. Hoidke jahedas ja kuivas kohas. Toodet valmistatakse 14 suuruses ja see on pakendatud erinevates kogustes. Pakendamisvõimalused on esitatud leheküljel 4.

**Puhastamine**: Peske toodet käsitsi seebi ja veega ning laske õhu käes kuivada. Desinfitseerige toodet 70% isopropüülalkoholi või 10% valgendi (naatriumhüpokloriti) lahusega.

**Kasutusaja lõpp**: Toode on mõeldud korduvalt kasutamiseks sama isiku poolt. Visake seade ära, kui sellel on näha liigse kulumise märke, ja asendage vajadusel uue tootega.

**Millal pöörduda tervishoiutöötaja poole**: Pöörduge tervishoiutöötaja poole, kui tekib seadmega seotud kõrvaltoimeid, sealhulgas nahareaktsioon või muutused seisundis.

**Teade kasutajale ja/või patsiendile**: Kui seadmega seoses tekib kahjulik vahejuhtum, eemaldage seade ja teavitage juhtumist nii seadme turustajat kui ka volitatud esindajat selles EL liikmesriigis, kus kasutaja elab.

**Turustajad**: *www.3pp-eifu.com/#distributors*

**Siltidel kasutatavad sümbolid**: Kõik toote märgistusel või tootega kaasasoleval infomaterjalil kasutatavad sümbolid on selgitatud 3 Point Products sümbolite legendis:
*www.3pp-eifu.com/#symbols*

3-Point Products, Inc.
118 Log Canoe Circle
Stevensville, MD 21666 USA
www.3pointproducts.com
+001.410.604.6393

EC REP
Sallmann Medical GmbH
Alois-Stockinger-Str.16
5020 Salzburg Austria
service@sallmann-medical.eu

CH REP
Swiss AR Services GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

©3-Point Products, Inc. 2026


**The Original** Oval-8® **Finger Splint**


## Sõrme mõõtmine Oval 8 sõrmeortoosi jaoks


Oval 8 sõrmeortoosid on meditsiiniseadmed ja tavaliselt annab parima tulemuse parajalt tihe (liibuv) sobivus. Õige suurus sõltub sellest, milline on sõrmeprobleem ja kuhu sõrmel ortoosi riba paigutatakse. Palun järgige juhiseid.


### Teil on vaja:

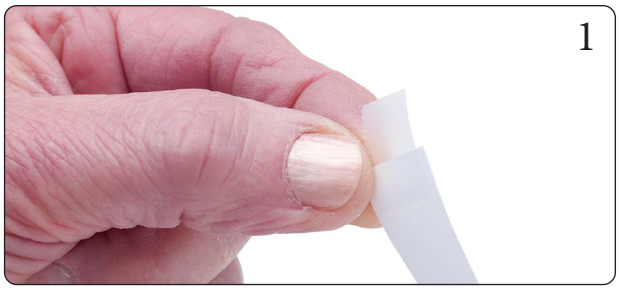


©3-Point Products, Inc. 2026

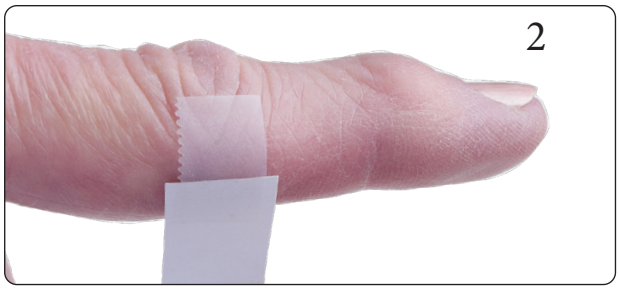The Original Oval-8® Finger Splint
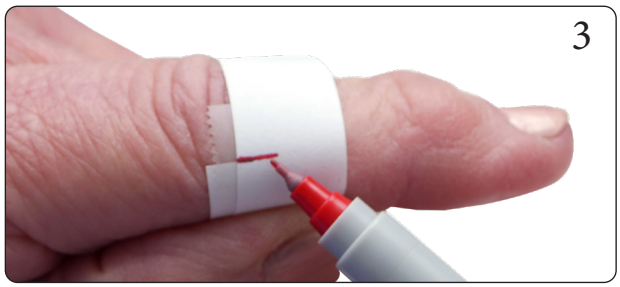
## Oval-8 suurus & Oval-8 pakendite tabel
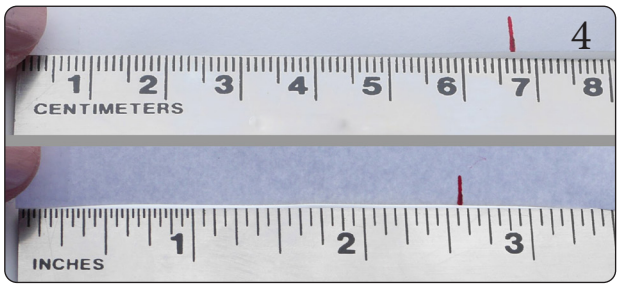
| Oval-8 suurus | | |
|---|---|---|
| Oval-8 suurus | Mõõdud tollides | Mõõdud sentimeetrites |
| 2 | 1-3/4" | 4.3 |
| 3 | 1-13/16" | 4.5 |
| 4 | 1-15/16" | 4.95 |
| 5 | 2-1/6" | 5.27 |
| 6 | 2-3/16" | 5.7 |
| 7 | 2-5/16" | 5.86 |
| 8 | 2-7/16" | 6.14 |
| 9 | 2-1/2" | 6.35 |
| 10 | 2-11/16" | 6.82 |
| 11 | 2-13/16" | 7.09 |
| 12 | 2-15/16" | 7.4 |
| 13 | 3" | 7.65 |
| 14 | 3-3/16" | 8.09 |
| 15 | 3-1/4" | 8.2 |

## Oval-8 pakendite tabel

| Oval-8 suurus | Üks (1) pakendis | Kolm (3) tükki pakendis | Viis (5) tükki pakis |
|---|---|---|---|
| 2 | √ | √ | √ |
| 3 | √ | √ | √ |
| 4 | √ | √ | √ |
| 5 | √ | √ | √ |
| 6 | √ | √ | √ |
| 7 | √ | √ | √ |
| 8 | √ | √ | √ |
| 9 | √ | √ | √ |
| 10 | √ | √ | √ |
| 11 | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | √ |
| 13 | √ | √ | √ |
| 14 | √ | √ | √ |
| 15 | √ | √ | √ |

| **Erinevates suurustes pakendid – kolm (3) suurust** |
|---|
| 2-3-4 |
| 4-5-6 |
| 6-7-8 |
| 8-9-10 |
| 10-11-12 |
| 13-14-15 |

| **Erinevates suurustes pakendid – viis (5) suurust** |
|---|
| 2-3-4-5-6 |
| 5-6-7-8-9 |
| 8-9-10-11-12 |
| 11-12-13-14-15 |

| Oval-8 komplekt<br>**Kogus suuruse kohta** | |
|---|---|
| Size 2 & 15 | 1 |
| Size 3-4 & 13-14 | 2 |
| Size 11 & 12 | 3 |
| Size 5 & 10 | 4 |
| Size 6-7-8-9 | 5 |

| **Suuruste komplekt**<br>Üks (1) igast suurusest – kokku 14 |
|---|
| 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |

Kõik pakendid ei pruugi olla saadaval kõigi müüjate juures

©3-Point Products, Inc. 2026